

唐德医用防压疮交替气垫床

台湾专业研发制造

Savvy8330

Made in Taiwan 品质最可靠




世界首创,唐德独家可调式微笑小小翻身床





可调整:左翻身
右翻身
全翻身

Savvy8330 8寸20管防压疮交替气垫床,有效减低皮肤受压,预防及改善压疮发生,另可选配微笑小小翻身床让病患视野变大,活络病患脑力让心情愉悦而微笑。适合压疮中高风险病患。

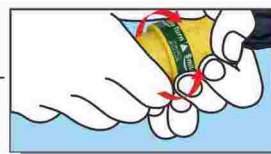

手动式翻身控制气阀,搭配原有控制泵浦,即可拥有高价位高阶双帮浦翻身床的功能,减低照护者经济负担

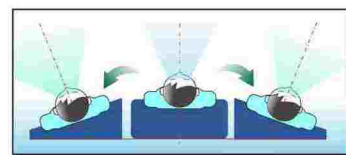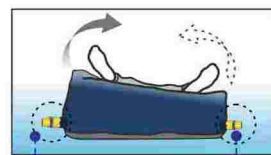


定时左右微翻身大幅加宽了病患的视野,让病患产生期待视野来临的倒数,活络病患脑力的活动,有了期盼心情自然愉悦而微笑




微翻身功能亦可辅助病患进行更换床单的动作而病患不须下床,提升照护效率

专利申请中 仿冒必究

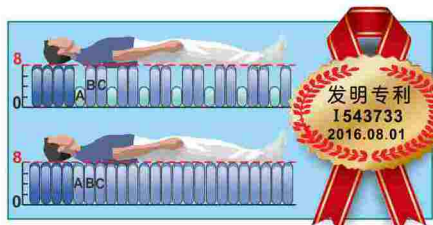

唐德发明专利 完全交替不晕床 睡得更安稳

床垫维持固定高度,不因床管充泄气而上下移动造成晕床现象。完全交替技术使床管皆充气至同一高度后再进行泄气,气垫床高度不变增添使用者舒适度及睡眠质量。

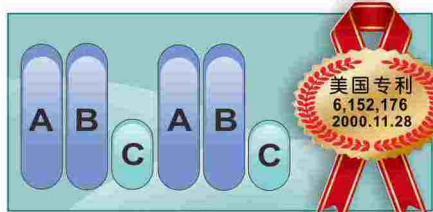

唐德发明专利 3-1交替减压 睡得更舒适

床垫设计2/3床管充气,1/3床管泄气,一方面既达到交替减压的目的,另一方面仍有2/3的床管在支撑人体,舒适性更优于2-1交替减压。

3-1交替减压为唐德1998年之专利设计,目前受业界广为认可追随及仿效。




唐德发明专利 囊中管床管接头 睡得更可靠

独家设计囊中管接头,将所有接头及排管设计于床管底部,突破业界传统设计将排管设置于床侧,容易因家属探病坐压或移动病患而造成排管接头脱落漏气的风险。徒手即可拆装清洗,不须任何工具。管上管式安全防护气囊“cell-on-cell”科技搭配唐德独家发明专利囊中管使气垫床在停电时仍可支撑病人重量达24小时,避免因停电床垫下陷而产生压疮。



唐德独家设计 相对压力校准 睡得更香甜

不论高山或平地、夏天或冬天、白天或晚上,唐德采用相对压力校准,达到气垫床软硬恒定,不因环境温差及海拔地形的变化而压力失准。

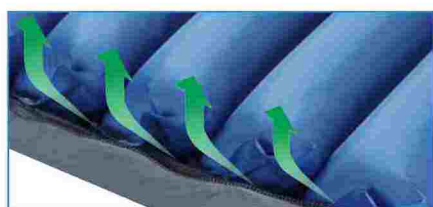

唐德独家设计 独立式微漏气 (iLAL) 睡得更乾爽

利用床管交替时所排出的空气送回床垫内,藉以带走气垫床多馀的热量及湿气,降低床垫温度确保床垫乾爽舒适,每次交替约有1/3床垫体积的空气经由30个1.5mm的小孔排出,最大可达50-60公升,停电时仍可支撑病患重量达24小时。一般气垫床于床管设置直径约0.1mm喷气孔,整床约含10~30小孔,两者喷气孔面积相差高达225倍,停电时无法支撑病患提高褥疮产生风险。

AKTC
唐德工业股份有限公司
Since 1989




唐德特别设计 脚跟区域完全零压 睡得更放心

脚跟是压疮发生的高风险部位,唐德特别设置三支床管降低高度以确保脚跟完全在零压的保护下降低压疮发生的风险,若脚跟已有压疮发生更可加快压疮的复原速度。



床罩采用 零接缝医疗级双向弹性布 睡得更安心


零接缝床罩防止血水体液渗入,通过多项生物相容性测试之双向弹性布可减少肌肤与床罩所产生的剪力与摩擦力,有效防止压疮的产生。使用可拆式塑钢拉链,上罩,可用洗衣机与烘乾机水洗与烘乾。

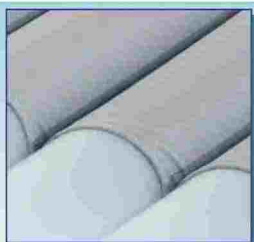

车缝固定鸟眼布床管固定带可防止气垫床使用时造成的滑动,传统塑胶固定带易脱落且无法维修,一旦损坏需更换整组下罩



弹力式挂勾,操作不晃动,降低因震动引起之噪音

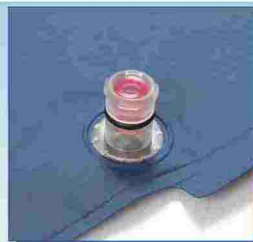


唐德专利床管快接,拆装容易,方便床管更换



独家设计接头可於一分钟内快速充、泄气,节省安装时间简单一转,即可在急救时把气垫床内的空气迅速排出并进行心肺复苏术

数位智慧型变频空气泵浦

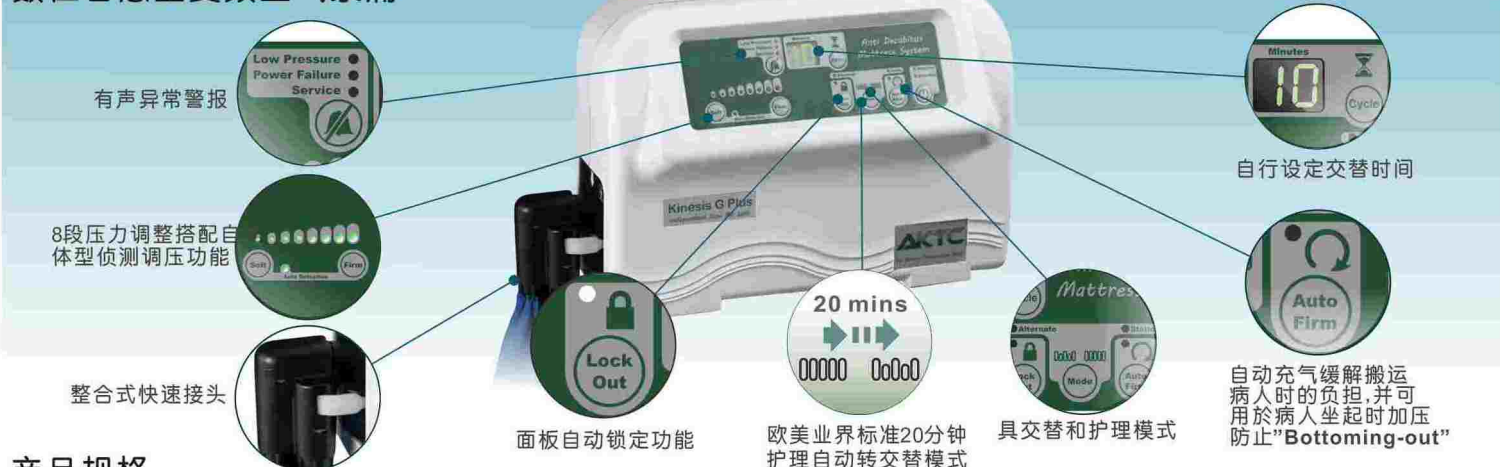

产品规格

泵 浦		气 垫 床	
交替模式	3-1交替减压	尺 寸(长x宽x高)	200x90x20公分
尺 寸(长x宽x高)	33x12x22 公分	重 量	7公斤
重 量	3.5 公斤	最大载重	180 公斤
控制方式	电子式(数位按键+LED显示器)	头枕功能	3管定压
流 量	>8.0L	床管数	20管
可调压力范围	8段15~50 (+/-5)mmHg	床管材质	尼龙+TPU聚氨酯(醚类)
电压 / 频率	230V/50Hz	上罩材质	双向弹性布(零接缝, 防水透湿, 防霉抗菌, 生物相容, 水洗温度95度, 防火等级 BS7175:Crib5)
交替循环时间	10 / 15 / 25 / 30 分钟	底垫材质	聚酯纤维+PU聚氨酯
静态自动转交替	20 分钟	微笑小小翻身	可选配
有声异常警报	断电警报 / 低压警报 / 服务警报 错误代码检视	CPR快速泄气	专利快充转式Q-CPR
保险丝额定	T1A / 250V	唐德工业股份有限公司 324 台湾桃园市平镇区涌丰里工业五路3号 消费者服务专线: 0800-211-365 电话: (03)419-4567 传真: (03)469-3789 电邮: service@aktc.com.tw 网址: www.aktc.com.tw	
外壳防尘防水等级	IP21		
安规认证	IEC60601-1 医疗电子器材电性安全测试 IEC60601-1-2 电磁相容性	代理及售后机构: 云南益健贸易有限公司 地址: 昆明市白塔路308号1单元404 电话: 0871-63183456 手机: 13354646200	